

10

旋转式混匀仪

对各种小瓶内的生物样品进行混匀。
适用于免疫沉淀反应、防止血液凝固、乳胶诊断等。



CRT-350

选配件

选配

- 带盘架的试管夹
- 带盘架的烧瓶夹
- 锥形烧瓶盘架（烧瓶夹具底座&烧瓶夹具）
- 盘架连接杆

※ 以上图片所示的盘面、支架、试管和烧瓶都为选配。



使用双层试管盘架最多放置试管数量

试管	数量(个)
1.5ml	120
5ml	36
15ml	36
50ml	24



角度任调



可快速安装和移除盘架（选配）



性能特点

- 微处理PID控制器。
- 转速范围：2~70 rpm
- 最大倾斜角度为90°
- 实现水平混匀和垂直混匀。
- 数字显示速度控制，低转速也能保持平稳。
- 带有橡胶脚垫的简约式设计，最大程度减少振动和噪音。

操作简单

- 简约式固定装置，实现快速安装和移除。
- 各种试管和烧瓶盘架尺寸可选择，满足不同需求。

- 同时使用两个试管盘架，最多可以实现120根试管同时混匀。
- 形象和彩色真空荧光显示屏，感光式按键。
- 定时功能：1分~99小时59分钟。

安全特点


- 步进电机具有自我保护功能和长寿命的特点。
- 自我检测，自我识别错误功能。
- 主机材质为PP，具有抗化学性和易清理的特点。
- 电流过载保护功能。

型号		CRT-350
控制系统	PID反馈控制	
显示器	VFD	
振动	振动模式	轨道式
	转速范围 (rpm)	2 ~ 70
	倾斜角度	0 ~ 90°
	最大承载重量 (kg / lbs)	4 / 8.8
材质	盘面 (选配)	铝
	主机	PP (polypropylene)
尺寸	外尺寸·带盘面 (选配) (WxDxH) (mm / inch)	320x325x463 / 12.6x12.8x18.2
	净重·带盘面 (选配) (kg / lbs)	6.5 / 14.3
电源要求	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	
货号	AAH3E115K	

※ 环境温度要求：5-40°C, 湿度要求：最高 80%

带盘架的试管夹


描述	最多放置试管数量	货号
1.5ml (Ø10mm / Ø0.39")	60	AAA3E501
5ml (Ø12mm / Ø0.47")	18	AAA3E502
15ml (Ø16.5mm / Ø0.65")	18	AAA3E503
50ml (Ø29mm / Ø1.14")	12	AAA3E504

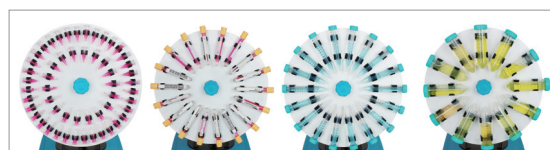

试管盘架 (1.5ml / 5ml / 15ml / 50ml)

锥形烧瓶盘架

描述	最多放置试管数量		货号
带盘架的烧瓶夹	N/A		AAA3E511
烧瓶夹 (不锈钢)	50ml	13	AAA23550
	100ml	8	AAA23551
	300ml	6	AAA23556
烧瓶夹 (塑料)	50ml	13	AAA30570
	100ml ~ 125ml	8	AAA30571
	300ml	6	AAA30574

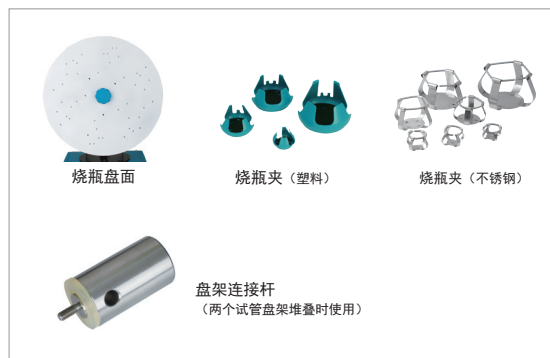

双层固定器

描述	货号
盘架连接杆	AAA3E521

盘架连接杆
(两个试管盘架堆叠时使用)